




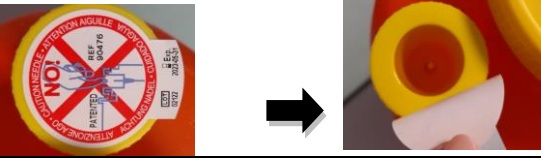
Per il dosaggio di catecolamine, metanefrine, acido 5-idrossiindolacetico, acido omonovanillico, acido vanilmandelico, dopamina, serotonina, ossaluria **utilizzare solo contenitori forniti dall'ambulatorio prelievi**. E' possibile ritirare gratuitamente presso il punto prelievi il bidone per la raccolta delle urine delle 24 ore contrassegnato con la seguente etichetta.



Attenzione contiene acido. Tenere il contenitore lontano dalla portata dei bambini.

Nel caso di raccolte con volumi maggiori ai 3 Litri, utilizzare un secondo contenitore idoneo.

Nei quattro giorni precedenti la raccolta, eccetto quando è richiesta l'ossaluria, **non assumere** alimenti contenenti capsacina (peperoncino, tabasco, paprika, salsa chili), succhi di frutta, albicocche, melanzane, kiwi, ribes, noci, banane, cioccolato, avocado, ananas, prugne, pomodori, vanillina, caffeina, the e bevande alcoliche.

1	Al risveglio (ad esempio alle ore 6:00) svuotare la vescica eliminando le urine nel water.	
2	<ul style="list-style-type: none"> - Raccogliere le urine successive dell'intera giornata nel bidone, incluse quelle del primo mattino del giorno successivo (prima minzione del mattino). - Conservare in luogo fresco e asciutto. - A conclusione della raccolta agitare delicatamente il bidone per miscelare le urine. 	
3	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare il volume di urine raccolte sulla scala graduata del bidone. - Scrivere sulla etichetta della provetta il valore rilevato (espresso in mL). 	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>Verificare il volume di urina raccolta sulla scala graduata</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Scrivere il volume raccolto sull'etichetta della provetta, espresso in mL</p> </div> </div>
4	Togliere l'etichetta presente sul tappo piccolo del contenitore.	
5	<ul style="list-style-type: none"> - Inserire la provetta con il tappo arancione rivolto verso il basso e premere a fondo: l'urina fluisce automaticamente nella provetta; attendere il riempimento completo. - Eliminare le restanti urine. - Consegnare la provetta al Centro Prelievi il mattino del completamento della raccolta. In caso di dubbi, consegnare direttamente il bidone al personale del Centro Prelievi. 	